


Guía de instrucciones para el sistema contenedor MINI-BAG PLUS

Ensamblaje

Importante: Si su medicamento se entregó con el vial conectado al sistema MINI-BAG PLUS, comience con el Paso 5.

1. Quite la tapa del vial de medicamento.
2. Restriegue la parte superior del vial con una toallita de alcohol durante al menos 15 segundos y deje que se seque con el aire.
3. Jale la cubierta de aluminio de la mini bolsa. Inspeccione el vial de medicamento para ver que no tenga humedad. Si tiene humedad, llame a la farmacia antes de usar.
4. Coloque el vial en posición vertical sobre una superficie estable. Presione firmemente el adaptador de medicamento con ambas manos hasta que el vial encaje en su lugar. NO lo gire. Úselo únicamente si el vial está encajado por completo.

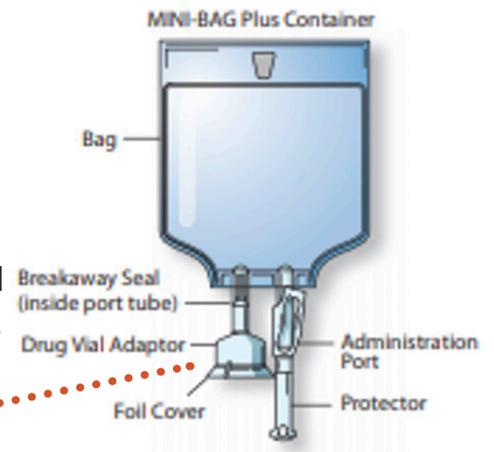

Reconstitución

5. Apriete la bolsa y verifique el vial. Úselo únicamente si el vial está encajado por completo y seco.
6. Doble el vial hacia arriba y abajo para romper el sello ubicado en el cuello de la bolsa.
7. Sostenga la bolsa con el vial hacia ABAJO. Apriete la bolsa para que la solución ingrese en el vial (hasta que se llene la mitad). Sacuda la bolsa/vial para que se disuelva el polvo.
8. Sostenga la bolsa con el vial hacia ARRIBA. Apriete la bolsa para que ingrese aire en el vial. Libere la bolsa para drenar el medicamento disuelto del vial. Repita los pasos 7 y 8 hasta que el vial no tenga más medicamento y la solución quede completamente mezclada. No quite el vial de medicamento.



Guía de instrucciones para el sistema contenedor MINI-BAG PLUS

Preparación de la manguera de administración

1. Saque el conjunto de administración con manguera del paquete.
2. Gire el dial de modo que la flecha quede alineada con la posición OFF (cerrado).
3. Quite la protección del puerto de la bolsa MINI-BAG PLUS.
4. Quite la cubierta protectora del punzón de la manguera. Tenga cuidado de que el punzón descubierto no tenga contacto con sus manos ni con ninguna otra superficie.
5. Inserte el punzón de la manguera a un ángulo de 90° en el puerto de la bolsa, empujando con un movimiento giratorio hacia atrás y adelante. Asegúrese de que el punzón se inserte en el puerto de la bolsa hasta el borde elevado.
6. Cuelgue la bolsa MINI-BAG PLUS en el portador de suero intravenoso.
7. Apriete la cámara de goteo de la manguera hasta que se llene por lo menos la mitad.
8. Gire el dial de la manguera de la posición OFF a la posición OPEN (abierto) y deje que la manguera se llene de fluido por completo. Esto se conoce como “cebado” de la manguera. Durante el cebado, sostenga el dial de la manguera con la mano. No deje que el extremo de la manguera tenga contacto con ninguna superficie.
9. Cuando el fluido llegue al extremo de la manguera, gire el dial nuevamente a la posición OFF (cerrado).



Cómo comenzar la infusión

1. Restriegue el conector sin aguja con una toallita de alcohol durante al menos 15 segundos y deje que se seque con el aire.
 2. Quite la presilla del catéter (si tiene presilla).
 3. Enjuague el conector sin aguja con una solución salina siguiendo las cantidades indicadas.
- IMPORTANTE: Si tiene problemas para enjuagar la vía o si siente dolor, DETÉNGASE, no continúe. Llame a su enfermero(a) o farmacia para obtener indicaciones.**
4. Conecte la manguera cebada al conector sin aguja.
 5. Gire el dial de la manguera según la tasa que se indica en la etiqueta del medicamento recetado.
 6. Confirme que todas las presillas estén en la posición abierta y que el medicamento esté goteando.

Al completar la infusión

1. Una vez que la cámara de goteo esté vacía, gire el dial a la posición OFF para cerrarlo.
 2. Desconecte la manguera del conector sin aguja.
- Importante: Si recibe su medicamento más de una vez al día, coloque una tapa estéril en el extremo de la manguera para mantenerla estéril. Cada manguera puede usarse por 24 horas.**
3. Restriegue el conector sin aguja con una toallita de alcohol durante al menos 15 segundos y deje que se seque con el aire.
 4. Enjuague el catéter con una solución salina siguiendo las cantidades indicadas.
 5. Nuevamente, restriegue el conector sin aguja con una toallita de alcohol durante al menos 15 segundos y deje que se seque con el aire.
 6. Enjuague el catéter con un enjuague de heparina (si ha sido indicado) siguiendo las cantidades indicadas.
 7. Coloque la presilla en el catéter (si tiene presilla) luego de finalizar los enjuagues.
 8. Deseche la bolsa JUNTO CON el vial conectado en la basura, a menos que se le haya indicado lo contrario.

